

AR | Система субкортикарных имплантов
IR | Система имплантов с полированной шейкой

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

BIOMEN

DENTAL IMPLANT SYSTEM

AR | SUBMERGED IMPLANT SYSTEM

BIO^{TE}EM
DENTAL IMPLANT SYSTEM

AR | Система субкортикальных имплантатов

Одинарная пришеечная резьба

- 0,7 шага x 0,15 глубины x двойной виток
- Синхронизированная резьба
- Оптимизированный дизайн для поверхности SLA
- Усиленная фиксация в кости

Открытая резьба

- Предотвращает некроз кости
- Нет зон компрессии и ишемии

Конус имплантата 1,5°

- Легко получить хорошую первичную стабильность в мягкой кости

Спиральная резьба


- 0,7 шага x 0,15 глубины x двойной виток
- Мощная самонарезка
- Сохраняет направление введения имплантата
- Легко изменить направление введения
- Высокая первичная стабильность
- Сниженная чувствительность к размеру сверла - саморез

Апикальная часть


- Способность в осевому самосверлению
- Усиленная первичная стабилизация при одномоментной экстракции зуба с установкой имплантата

Режущая кромка


- Высокоэффективная функция самонарезания
- Простое изменение направления введения

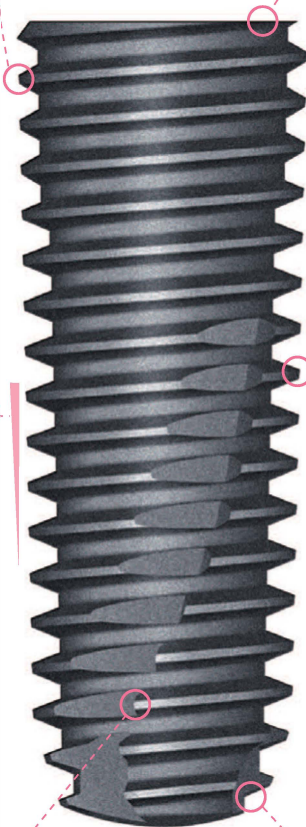


FXAR 3.4 | Последовательность сверления

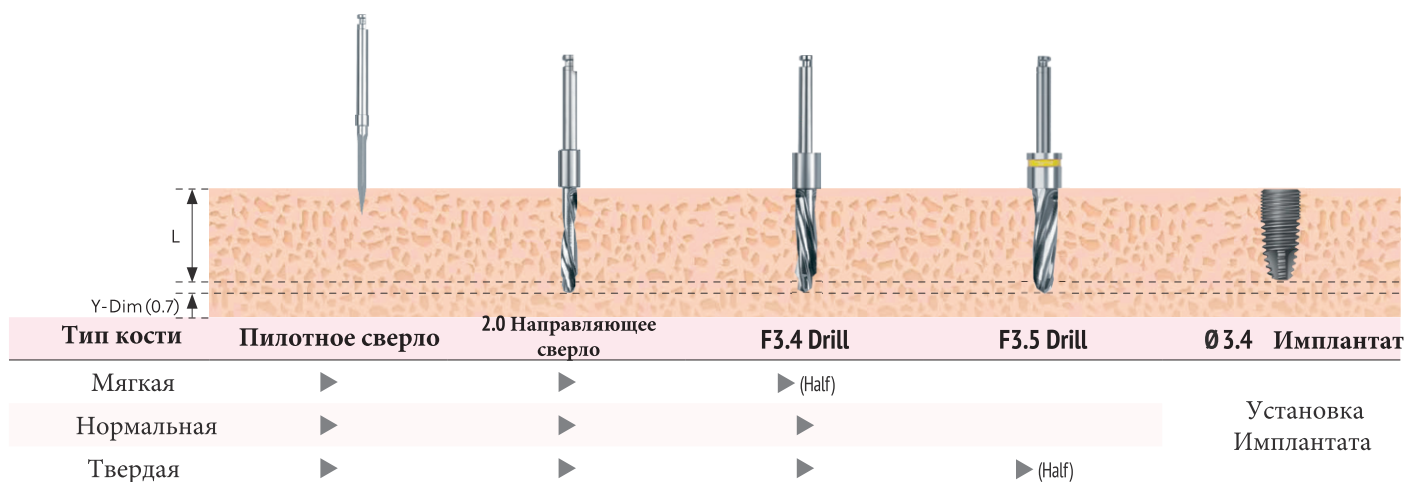


ASTFA 3.5/FXAR 3.7 | Последовательность сверления

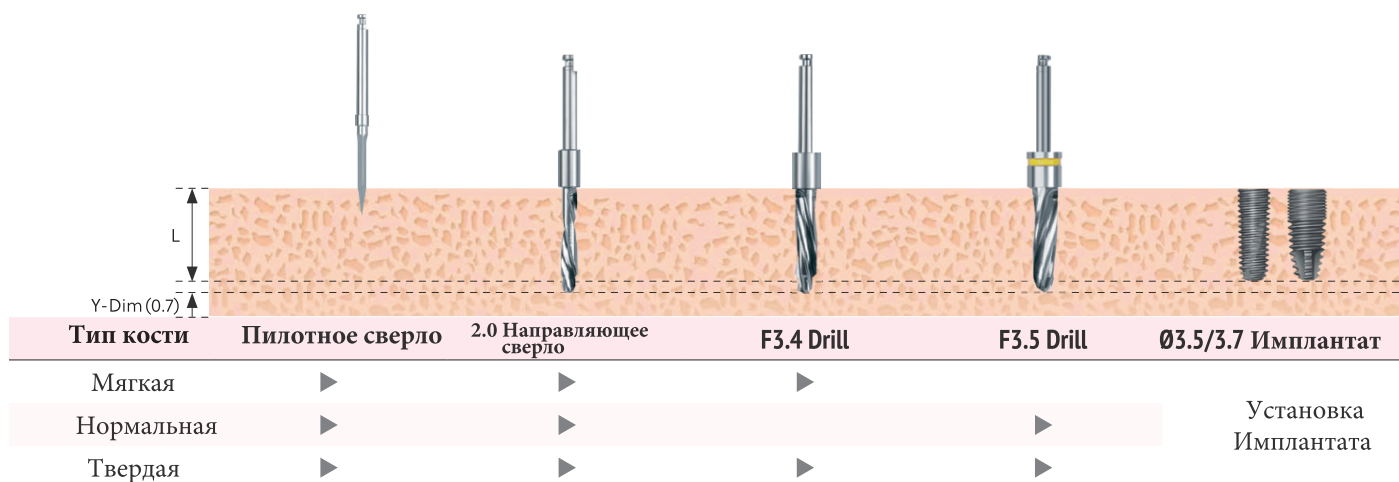

ASTFA 4.0/FXAR 4.0 | Последовательность сверления

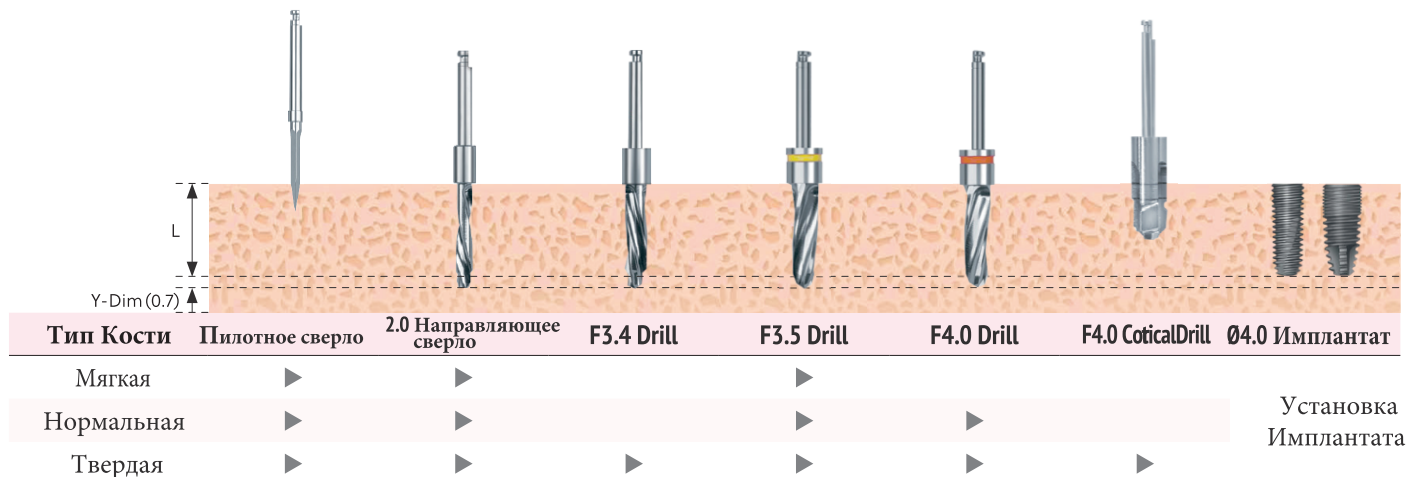


ASTFA 4.5 / FXAR 4.5 | Последовательность сверления

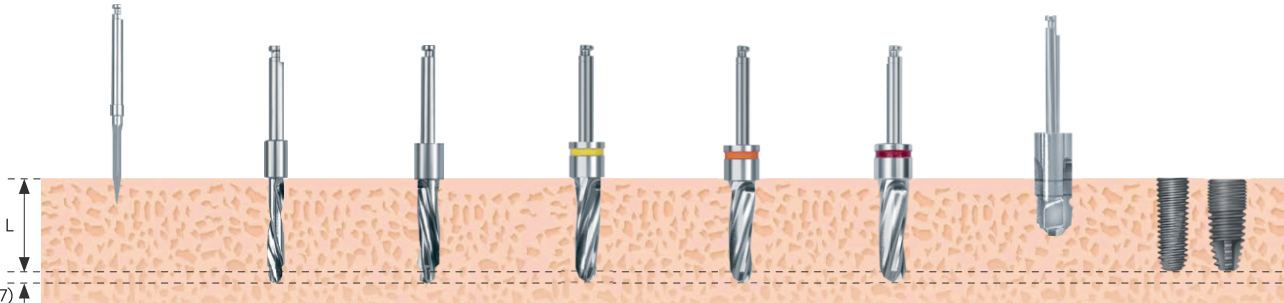


Тип кости	Пилотное сверло	2.0 Направляющее сверло	F3.4 Drill	F3.5 Drill	F4.0 Drill	F4.5 Drill	F4.5 Cortical Drill	Ø4.5 Имплантат
Мягкая	►	►		►	►			Установка Имплантата
Нормальная	►	►		►	►	►		
Твердая	►	►	►	►	►	►	►	

ASTFA 5.0 / FXAR 5.0 | Последовательность сверления

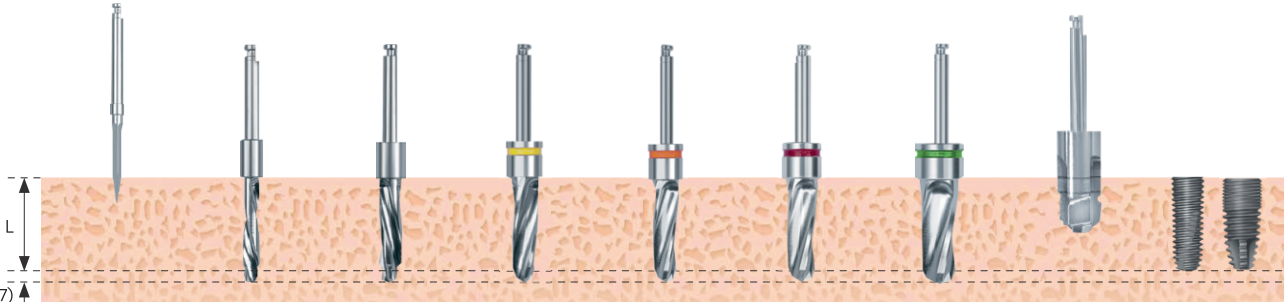

Тип кости	Пилотное сверло	2.0 Напр.сверло	F3.4 Drill	F3.5 Drill	F4.0 Drill	F4.5 Drill	F5.0 Drill	F5.0 Cortical Drill	Ø5.0 Имплантат
Мягкая	►	►		►	►	►			Установка Имплантата
Нормальная	►	►		►	►	►	►		
Твердая	►	►	►	►	►	►	►	►	

ASTFA 6.0 / FXAR 6.0 | Последовательность сверления

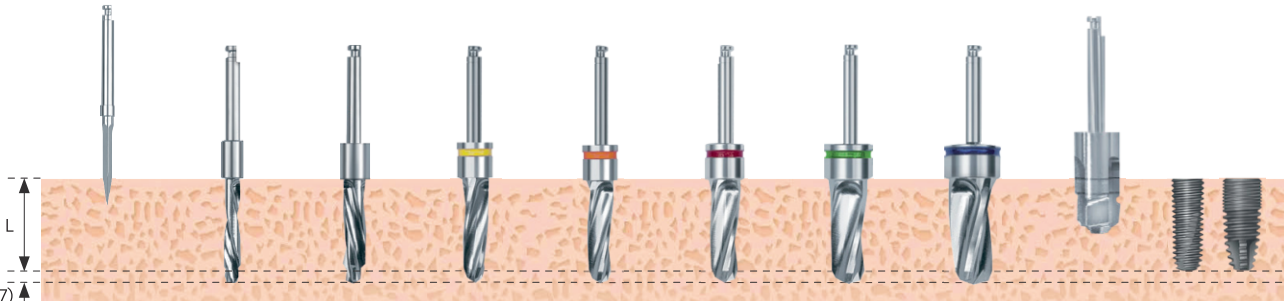

Тип кости	Пилотное сверло	2.0 Напр.св.	3.4 Drill	F3.5 Drill	F4.0 Drill	F4.5 Drill	F5.0 Drill	F6.0 Drill	F6.0 Cortical Drill	Ø6.0 Имплантат
Мягкая	►	►		►	►	►	►			Установка Имплантата
Нормальная	►	►		►	►	►	►	►		
Твердая	►	►	►	►	►	►	►	►	►	

IR | TISSUE LEVEL IMPLANT SYSTEM

BIO?EM
DENTAL IMPLANT SYSTEM

IR | Система имплантатов с полированной шейкой

Одношаговая резьба

- шаг 0,8 x глубина 0,45 x коническая
- вертушка с двойной резьбой
- Оптимизированный дизайн для поверхности RBM/SLA
- Усиленная фиксация

Спиралевидная резьба

- шаг 0,8 x глубина 0,45 x двойная резьба
- Мощный самонарез
- Высокая первичная стабильность

Апикальный конус 1.5°

- Легко получить начальную стабильность в мягких костях

Прямая часть имплантата


- Простой хирургический протокол
- Сниженная привязка к размеру сверла

Апикальная часть


- Эффективная функция самонарезания
- Высокая фиксация и стабилизация в кости



IR | Схема протезирования

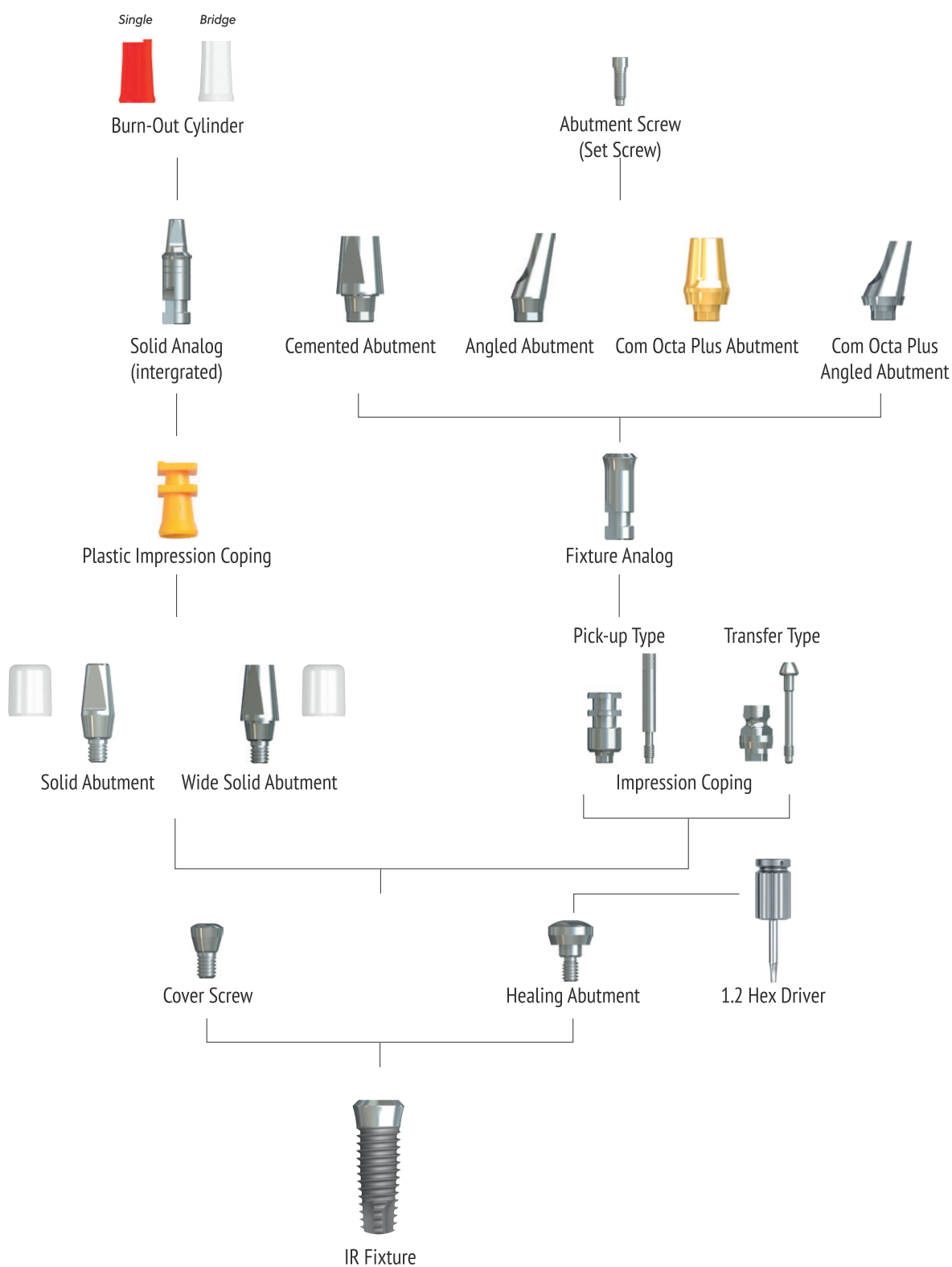


FXIR 3.5 | Последовательность сверления

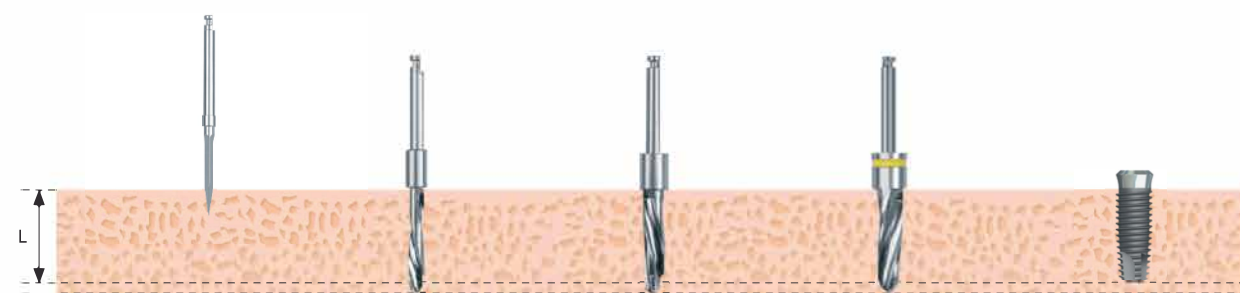


Bone Density	Point Drill	2.0 Drill	F3.4 Drill	F3.5 Drill	Ø 3.5 Fixture
Мягкая	►	►	►		
Нормальная	►	►	►	► (Half)	Установка Имплантата
Твердая	►	►	►	►	

FXIR 4.1 | Последовательность сверления

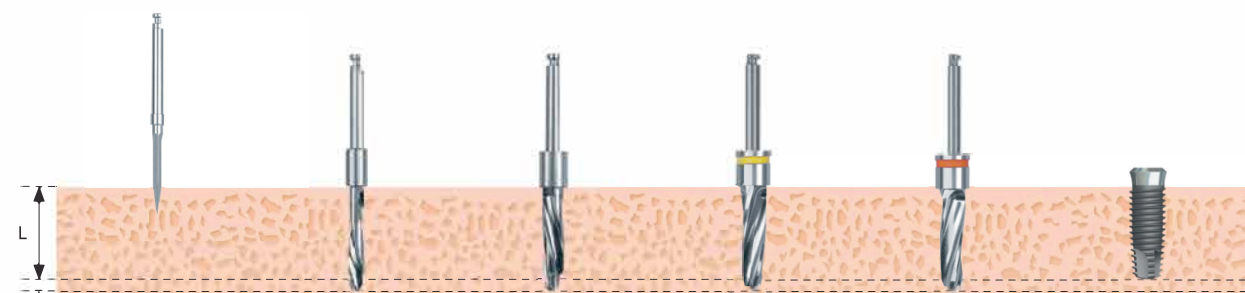

Bone Density	Point Drill	2.0 Drill	F3.4 Drill	F3.5 Drill	F4.0 Drill	Ø4.1 Fixture
Мягкая	►	►		►		
Нормальная	►	►		►	► (Half)	Установка Имплантата
Твердая	►	►	►	►	►	

FXIR 4.8 | Последовательность сверления

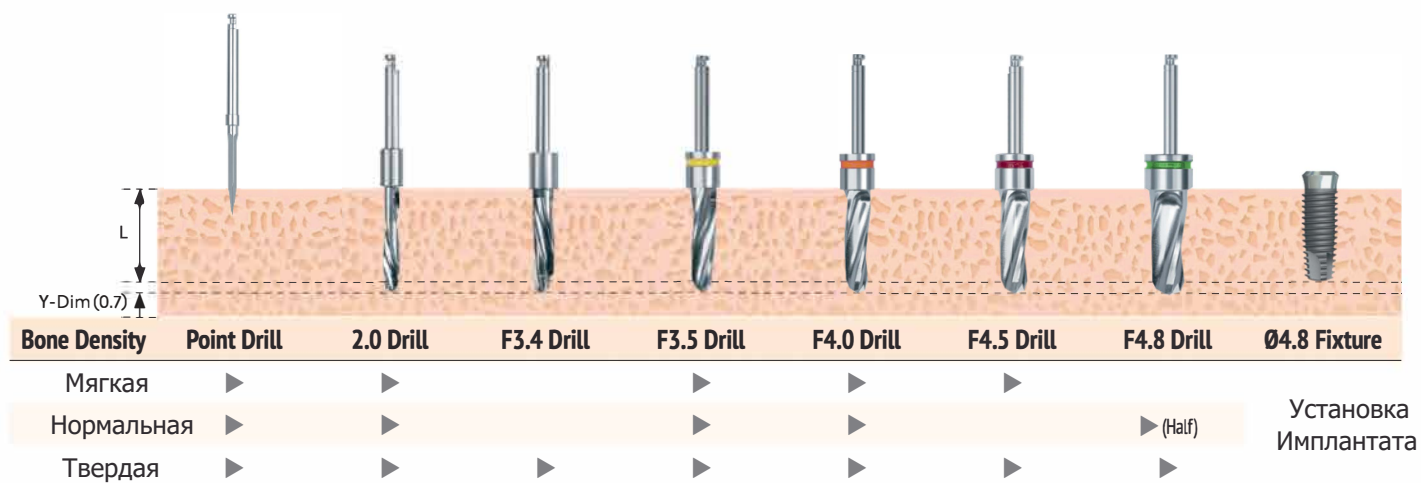

FXIR 5.5 | Последовательность сверления

